



Vet-Tables

Par Dispomed

Table à ciseau Vet-Tables



Table servant à de nombreuses utilités

Chaque fois que vous avez besoin d'une civière ou une aide supplémentaire pour soulever un chien lourd ou effectuer une intervention chirurgicale, la table à ciseaux est idéale pour vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes.

Un indispensable pour toute clinique vétérinaire.

Grâce à sa capacité de charge exceptionnelle, la table à ciseau Vet-Tables protège vos patients et votre personnel des blessures pouvant être occasionnées par la manipulation d'animaux lourds.

- Capacité de levage de 300 Livres (136 kg)
- Fabriqué au Canada
- Système d'attache sur rail qui permet de maintenir le patient en toute sécurité
- Les parties mobiles de la table sont montées sur roulement à billes
- Plateau en acier inoxydable de grade 304
- Déplacement en hauteur du plateau de 11 po. à 40 po. (27.9 cm à 101.6 cm)
- Nettoyeurs de glissières qui empêchent les poils de s'accumuler dans les rails
- Structure entièrement en aluminium plein pour une plus grande robustesse
- Le moteur silencieux s'arrête automatiquement lorsque la hauteur maximale est atteinte
- Garantie 5 ans

Table à ciseau Vet-Tables



Votre table doit être **adaptée à vos besoins**, et pour cette raison Dispomed vous propose des options personnalisées afin de mieux concevoir votre table idéale.

1. Bases

Base mobile



La base mobile comprend des roues de 4 pouces avec freins. La base mobile est également livrée avec une batterie afin d'être utilisée lorsque déconnectée. À charge pleine, il est possible de faire 30 remontées.

Base fixe

La base fixe est idéale pour une salle d'examen, elle vous permet d'installer les chiens les plus pesants en toute sécurité.



2. Les plateaux



Plateau d'examen

Le plateau d'examen standard est parfait pour une salle d'examen. Il est disponible en 4 et 5 pieds.

Plateau de chirurgie

Le plateau de chirurgie est muni d'un contour incurvé, d'un trou et d'un crochet à une extrémité permettant l'égouttement des liquides au cours de l'intervention chirurgicale. Le plateau de chirurgie comprend 4 attaches pattes pouvant être déplacés sur les 2 rails disposés de chaque côté de la table. Disponible en 4 et 5 pieds.



Table à ciseau Vet-Tables



Plateau en V

Le plateau en V vous donne un ajustement avec 2 poignées indépendantes permettant l'ajustement de chacun des panneaux de la table. Un tiroir est installé entre les 2 panneaux pour accumuler les liquides et déchets de la chirurgie. Le plateau en V comprend 4 attaches pattes pouvant être déplacés sur les 2 rails disposés de chaque côté de la table. Disponible en 4 et 5 pieds.



Plateau dentaire

Le plateau dentaire est le meilleur plateau à utiliser lorsque vient le temps d'exécuter une procédure de dentisterie. Le grillage facile à retirer permet au liquide de s'égoutter dans le bassin. La valve de vidangage est sous le lavabo et facile d'accès, ce qui permet un nettoyage rapide et facile. Le plateau de dentisterie comprend 4 attaches pattes mobiles placés sur les rails de chaque côté de la table. Le pédalier d'ajustement de la hauteur est fixé à l'avant de la table pour un accès plus facile lors de l'exécution procédures de dentisterie.



3. Plus d'options

Une fois que vous avez choisi votre base et votre plateau, il y a encore quelques options que vous pouvez ajouter à votre table.

Inclinaison

Tous nos plateaux sont disponibles avec l'option d'inclinaison électrique vous permettant d'avoir l'angle parfait pour travailler. L'option d'inclinaison est livrée avec une pédale électrique double afin que vos mains restent libres (table ciseau seulement).




Chauffante

Vous désirez offrir un rapport de chaleur additionnel à votre patient? Vous n'avez qu'à ajouter l'option chauffant à votre plateau précédemment sélectionné. Le plateau est chauffé avec un circuit d'eau, pour éviter les risques de brûlures, comme il n'y a pas de différence de température d'une extrémité à l'autre du plateau. La chaleur stable est répandue uniformément à l'intérieur du plateau, cette option est livrée avec la pompe à eau HTP 1500. Cette option n'est pas disponible sur les plateaux en V.



Choix de couleurs

Vous pouvez personnaliser la couleur de votre table selon votre clinique en créant la combinaison parfaite avec notre couleur standard gris pierre.

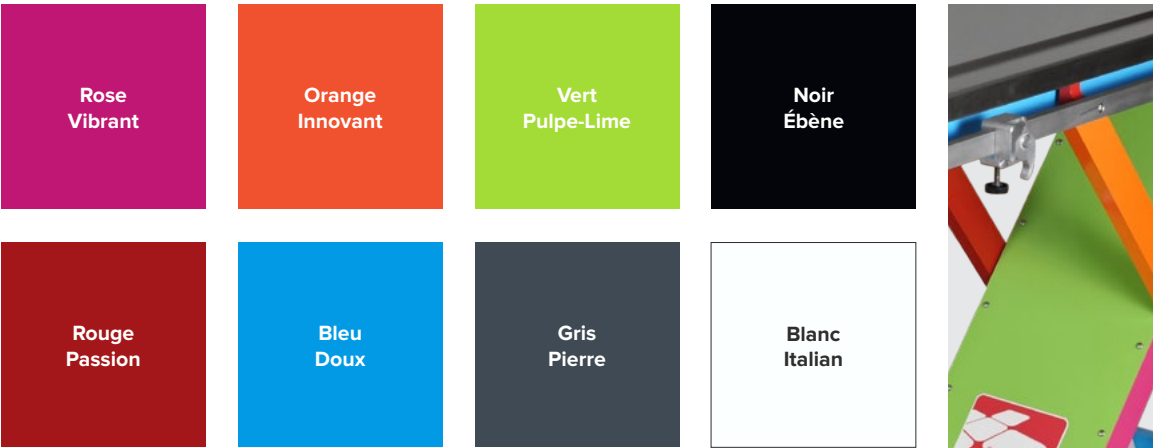

Configurations offertes

Fixe

- 4' (1.21m) examen: # 285-0200-4EXX
- 4' (1.21m) chirurgie, chauffant, inclinable: # 285-0200-4SHT
- 4' (1.21m) chirurgie, chauffant: # 285-0200-4SHX
- 4' (1.21m) chirurgie, inclinable: # 285-0200-4SXT
- 4' (1.21m) chirurgie: # 285-0200-4SXX
- 4' (1.21m) "V", inclinable: # 285-0200-4VXT
- 4' (1.21m) "V": # 285-0200-4VXX
- 5' (1.52m) examen: # 285-0200-5EXX
- 5' (1.52m) chirurgie, chauffant, inclinable: # 285-0200-5SHT
- 5' (1.52m) chirurgie, chauffant: # 285-0200-5SHX
- 5' (1.52m) chirurgie, inclinable: # 285-0200-5SXT
- 5' (1.52m) chirurgie: # 285-0200-5SXX
- 5' (1.52m) "V", inclinable: # 285-0200-5VXT
- 5' (1.52m) "V": # 285-0200-5VXX
- 5' (1.52m) dentisterie: # 285-0200-5DXX
- 5' (1.52m) dentisterie, inclinable: # 285-0200-5DXT
- 5' (1.52m) dentisterie, inclinable, chauffant: # 285-0200-5DHT
- 5' (1.52m) dentisterie, chauffant: # 285-0200-5DHX

Mobile

- 4' (1.21m) examen: # 285-0210-4EXX
- 4' (1.21m) chirurgie, chauffant, inclinable: # 285-0210-4SHT
- 4' (1.21m) chirurgie, chauffant: # 285-0210-4SHX
- 4' (1.21m) chirurgie, inclinable: # 285-0210-4SXT
- 4' (1.21m) chirurgie: # 285-0210-4SXX
- 4' (1.21m) "V", inclinable: # 285-0210-4VXT
- 4' (1.21m) "V": # 285-0210-4VXX
- 5' (1.52m) examen: # 285-0210-5EXX
- 5' (1.52m) chirurgie, chauffant, inclinable: # 285-0210-5SHT
- 5' (1.52m) chirurgie, chauffant: # 285-0210-5SHX
- 5' (1.52m) chirurgie, inclinable: # 285-0210-5SXT
- 5' (1.52m) chirurgie: # 285-0210-5SXX
- 5' (1.52m) "V", inclinable: # 285-0210-5VXT
- 5' (1.52m) "V": # 285-0210-5VXX
- 5' (1.52m) dentisterie: # 285-0210-5DXX
- 5' (1.52m) dentisterie, inclinable: # 285-0210-5DXT
- 5' (1.52m) dentisterie, inclinable, chauffant: # 285-0210-5DHT
- 5' (1.52m) dentisterie, chauffant: # 285-0210-5DHX

Table à colonne électrique Vet-Tables



Espace restreint

Si vous êtes à la recherche d'une table vous donnant le plus d'espace pour vos jambes, vous devez absolument jeter un coup d'œil à notre table à colonne électrique.

La table électrique à colonne Vet-Tables vous offre un large choix de configuration. Fabriquée au Canada, elle est conçue spécifiquement pour les besoins vétérinaires. La table électrique à colonne vous offre une grande stabilité tout en ayant un espace plancher minimum.

- Garantie 5 ans
- Fabriqué au Canada
- Capacité de levage de 300 livres (136 kg)
- Tous les types de plateaux sont faits d'acier inoxydable de grade 304
- Épaisseur de plateau de calibre 16
- Système d'attache rapide sur rail pour maintenir le patient en place
- Hauteur maximum de 43,5 po.
- Hauteur minimum de 32,25 po.
- Moteur silencieux
- Composantes électriques résistantes à l'eau
- Inclinaison manuelle
- Plateau rotatif de 360 degrés
- Système de barrure du plateau pour une plus grande stabilité
- Poids : 305 lb (138.3 Kg)

Table à colonne électrique Vet-Tables



1. Les plateaux

Plateau de chirurgie

Le plateau de chirurgie est muni d'un contour incurvé, d'un trou et d'un crochet à une extrémité permettant l'égouttement des liquides au cours de l'intervention chirurgicale. Le plateau de chirurgie comprend 4 attaches pattes pouvant être déplacés sur les 2 rails disposés de chaque côté de la table. Disponible en 4 et 5 pieds.



Plateau en V

Le plateau en V vous donne un ajustement avec 2 poignées indépendantes permettant l'ajustement de chacun des panneaux de la table. Un tiroir est installé entre les 2 panneaux pour accumuler les liquides et déchets de la chirurgie. Le plateau en V comprend 4 attaches pattes pouvant être déplacés sur les 2 rails disposés de chaque côté de la table. Disponible en 4 et 5 pieds.



Table à colonne électrique Vet-Tables



Plateau dentaire

Le plateau dentaire est le meilleur plateau à utiliser lorsque vient le temps d'exécuter une procédure de dentisterie. Le grillage facile à retirer permet au liquide de s'égoutter dans le bassin. La valve de vidangage est sous le lavabo et facile d'accès, ce qui permet un nettoyage rapide et facile. Le plateau de dentisterie comprend 4 attaches pattes mobiles placés sur les rails de chaque côté de la table.



Plus d'options

Une fois que vous avez choisi votre base et votre plateau, il y a encore quelques options que vous pouvez ajouter à votre table.

Chauffante

Vous désirez offrir un rapport de chaleur additionnel à votre patient? Vous n'avez qu'à ajouter l'option chauffant à votre plateau précédemment sélectionné. Le plateau est chauffé avec un circuit d'eau, pour éviter les risques de brûlures, comme il n'y a pas de différence de température d'une extrémité à l'autre du plateau. La chaleur stable est répandue uniformément à l'intérieur du plateau, cette option est livrée avec la pompe à eau HTP 1500. Cette option n'est pas disponible sur les plateaux en V.

Table à colonne électrique Vet-Tables



Configurations offertes

4' (1.21m) chirurgie, chauffant : # 285-0400-4SHT

4' (1.21m) chirurgie : # 285-0400-4SXT

4' (1.21m) "V" : # 285-0400-4VXT

5' (1.52m) chirurgie, chauffant : # 285-0400-5SHT

5' (1.52m) chirurgie : # 285-0400-5SXT

5' (1.52m) "V" : # 285-0210-4SHX

5' (1.52m) dentisterie : # 285-0400-5DXT

5' (1.52m) dentisterie, chauffant : # 285-0400-5DHT

Poteau à soluté pour Vet-Tables électrique et à ciseaux

La hauteur du poteau à soluté est réglable tout en étant pratique pour accrocher votre pompe à infusion ou tout autre accessoire que vous voulez avoir près de votre patient.





Espace de travail supplémentaire

Si vous avez besoin d'espace supplémentaire lors de vos journées très occupées, cette table est idéale pour vous.

Table d'examen avec base en H

- Pièce complètement soudée
- Acier inoxydable #304
- Plateau plat
- Très stable

1. Longueur

Choisissez entre un plateau de 4 ou 5 pieds.

Table d'examen Vet-Tables



2. Base



Fixe

La table d'examen fixe est parfaite pour un espace désigné pour celle-ci.



Mobile

La table mobile comprend quatre roues de 4 pouces avec freins.

Configurations offertes

Fixe

4' (1.21m): # 285-0548-000

5' (1.52m): # 285-0560-000

Mobile

4' (1.21m): # 285-0545-000

5' (1.52m): # 285-0565-000



Manque d'espace

Si vous manquez d'espace, notre table d'anesthésie mobile est le combo parfait. Vous pouvez l'utiliser comme une civière et pour des fins de chirurgie.

Civière d'anesthésie mobile

- Disponible avec ou sans appareil d'anesthésie
- Roulette avec frein de 4"
- Pare-chocs intégrés
- 2 tablettes
- Drain pour les liquides et crochet pour seau
- Tiroir de rangement (optionnel).

Contactez votre représentant pour les options configurations

Les Vet-Tables sont fièrement fabriqués au Canada





Fabrique par **DISPOMED**



745 Nazaire-Laurin, Joliette (Qc) Canada J6E 0L6
Tél: 1 800 363-1746 - Fax: 450 759-8181
info@dispomed.com - www.dispomed.com