

— DISPOMED

Les 9 commandements pour une ouverture de clinique vétérinaire réussie

ÉQUIPEMENT VÉTÉRINAIRE



Guide d'aide à l'ouverture ou la rénovation d'une clinique vétérinaire

Lorsqu'on parle de l'ouverture ou de la rénovation d'une clinique vétérinaire, il est question d'un projet d'envergure. L'expertise de Dispomed vous permet d'éviter les erreurs et les oublis qui peuvent vous coûter cher. Allégez votre stress en laissant le soin au personnel qualifié de Dispomed de prévoir et d'organiser tout ce dont vous aurez besoin afin d'avoir une pratique fonctionnelle et organisée.



Les 9 commandements pour une ouverture de clinique réussie

1. Trouver l'emplacement idéal

Une fois l'emplacement de vos rêves trouvé, le temps est venu de contacter l'équipe Dispomed afin de commencer le processus. Les représentants vous aideront à planifier un horaire afin de ne rien oublier.

2. Faire le plan de la clinique

Une fois l'étape du plan de la clinique entamé, il est temps d'entrée en contact avec votre conseiller Dispomed. Pourquoi? Avec plus de 35 ans d'expertise en ouverture de clinique, nous sommes en mesure de vous conseiller et de vous informer des avantages et inconvénients de la l'aménagement de votre espace. Le but n'est pas de vous faire recommencer à zéro, mais simplement de vous apporter un certain point de vigie afin de rendre votre quotidien le plus agréable et fonctionnel pour des années durant.

3. Planification du système d'évacuation et oxygène

Un autre avantage d'inclure votre représentant Dispomed au tout début du processus est qu'il s'assure avec vous de trouver les emplacements idéals pour vos prises d'oxygène et d'évacuation. Tout en prenant en compte vos besoins présents, mais aussi vos besoins futurs.

Puisque la canalisation pour l'évacuation et le système d'oxygène sont installés dans les murs et/ou le plafond, c'est lors de la construction/rénovation des divisions qu'il est préférable d'en faire l'installation. C'est aussi votre entrepreneur qui fera l'installation. Il est donc important de bien coordonner la commande du matériel nécessaire en collaboration avec votre entrepreneur. Notre service d'accompagnement pour la planification du vos systèmes d'évacuation et d'oxygène comprends l'accompagnement avec votre entrepreneur pour la planification et lors de l'installation.

4. Plan des cages et portes d'enclos

Dispomed vous offre de dessiner vos plans de cages et de portes d'enclos sur mesure selon l'espace prévu à cet effet, ce qui vous permet d'optimiser votre emplacement pour en maximiser les bénéfices. Puisque les délais sur ces produits sont de 4 à 6 semaines, il est important de prévoir l'achat des cages et des portes d'enclos à l'avance.

5. Choix des équipements

L'étape suivante consiste à faire une liste des équipements nécessaires. Votre représentant est en mesure de vous éclairer selon vos besoins et sur les modèles qui vous conviendront le plus selon les services que vous désirez offrir à votre clientèle.

De la grosseur idéale pour votre autoclave jusqu'au modèle de microscope, l'équipe Dispomed saura répondre à toutes vos questions tout en étant à l'affût des exigences de l'association de votre province.

Dans les prochaines pages de notre guide, vous trouverez un guide par catégorie de produit afin de vous éclaircir sur les différentes options qui s'offrent à vous et sur les questions que vous devez prendre en considération lors de votre choix d'équipements vétérinaires.



Les 9 commandements pour une ouverture de clinique réussie - suite

6. Installation des équipements*

Le moment est enfin venu! Dispomed est fier de faire l'assemblage de vos équipements dans votre nouvelle clinique. Nos équipes prendront soin de déballer vos équipements et d'en faire l'assemblage.

7. Formation de votre équipe*

Lorsque vous achetez chez Dispomed, vous obtenez gratuitement une formation sur vos équipements. Ainsi, vous êtes en mesure dès l'ouverture de la clinique d'utiliser votre nouveau produit à sa pleine capacité pour bénéficier de ses avantages.

8. Planification de l'entretien préventif

L'entretien préventif n'est pas à prendre à la légère. Vos équipements sont fort probablement tous neufs, mais un entretien préventif annuel prolongera leur durée de vie et préviendra de certains bris qui arrive toujours à un mauvais moment. Prenez le temps de discuter d'un plan d'entretien avec votre représentant.

9. Suivi

Une fois la rénovation ou l'ouverture de la clinique faite, sachez que Dispomed continue de vous épauler au sein de votre organisme. Parce qu'il s'agit d'un gros projet pour vous, notre équipe dévouée se chargera de faire un suivi évolutif selon les besoins changeants de la clinique.

*Ces services sont offerts au Canada seulement.

10 questions à se poser avant d'acheter un appareil d'anesthésie vétérinaire

1. Quel est l'**espace** disponible pour recevoir l'appareil ?
2. Utilisez-vous un **moniteur ou ventilateur** lors des interventions ?
3. Est-ce que l'**hypothermie** est un problème lors de vos chirurgies ?
4. Sur quel **type d'animal** travaillez-vous ?
5. Désirez-vous **utiliser plus d'un gaz** ?
6. Voulez-vous **déplacer** l'appareil ?
7. **Où est fabriqué** l'appareil ?
8. La **garantie** est-elle soutenue par le **distributeur ou le fabricant** et quel **service** vous est offert en cas de bris ?
9. Quelle est la **durée de la garantie** ?
10. Quel est le **coût de l'entretien** ?

Les appareils d'anesthésie Moduflex

MODÈLE	MODUFLEX OPTIMAX	MODUFLEX COAXIAL	MODUFLEX ELITE	MODUFLEX COMPACT	MODUFLEX NRB
					
LONGUEUR	64.77 cm (25.50")	53.34 cm (21")	53.34 cm (21")	68.58 cm (27")	68.58 cm (27")
LARGEUR	49.53 cm (19.50")	49.53 cm (19.50")	49.53 cm (19.50")	66.04 cm (26")	66.04 cm (26")
HAUTEUR	137.16 cm (54")	134.62 cm (53")	134.62 cm (53")	138.43 cm (54.50")	132.08 cm (52")
TABLETTE POUR ACCESSOIRE	Longueur 49.53 cm (19.5") Largeur 30.48 cm (12")	Longueur 31.75 cm (12.5") Largeur 19.68 cm (7.75")	Longueur 31.75 cm (12.5") Largeur 19.68 cm (7.75")	Optionnel	Longueur 22.86 cm (9") Largeur 17.78 cm (7")
OPTION D'INSTALLATION	Mobile ou murale	Mobile	Mobile	Mobile ou murale	Mobile ou murale
ESPACE DE RANGEMENT	Oui	Non	Non	Non	Non
CIRCUIT COAXIAL	Oui	Oui	Non	Non	Non
CIRCUIT OUVERT (BAIN)	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
CIRCUIT SEMI-OUVERT (ABOSORBEUR)	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
STABILITÉ	++	++	++	++	++
ENTRETIEN	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$
GARANTIE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
COMPATIBILITÉ IRM	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
PAYS DE FABRICATION	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada
	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info



10 avantages d'acheter un appareil dentaire Highdent

1. Le **compresseur silencieux** des appareils de dentisterie Highdent^{MC} élimine les problèmes d'acouphène, maux de tête et problèmes auditifs généraux ainsi que l'irritabilité, vous offrant donc une meilleure qualité de vie sonore.
2. **L'ergonomie** est un facteur important dans la conception des Highdent^{MC}. Que vous soyez de petite ou de grande taille, vous préviendrez les problèmes à long terme en ajustant l'appareil à la hauteur qui vous convient.
3. Si vous rêvez de voir l'intérieur de la gueule de votre patient, offrez-vous la **fibre optique**, ce qui augmentera votre visibilité du site d'intervention.
4. L'option de **suction** vous permettra de récolter les plus petits débris et ainsi prévenir l'insertion de déchets et de bactéries le long du tube endotrachéal chez vos patients, limitant la possibilité d'une pneumonie par aspiration.
5. Rien n'est plus facile que de **positionner l'appareil** Trio et Quattro à l'endroit idéal pour faciliter votre intervention sur le patient grâce à la mobilité de l'appareil.
6. **Le système de protège pièce à main, exclusif aux appareils de dentisterie Highdent de Dispomed, offre deux avantages importants**; il prévient à la fois le personnel de la clinique de se heurter sur les bouts pointus des pièces à main et empêche aussi le bris de ces dernières en les échappant au sol.
7. Comme tous les produits manufacturés chez Dispomed, **la garantie** vous assure un produit de qualité, une tranquillité d'esprit, et ce, pendant **5 ans**. Puisque les pièces à main ne sont pas fabriquées par Dispomed, une garantie de **1 an** est applicable.
8. Dispomed offre une **formation** de base par téléphone ou à votre clinique dans certaines régions sur l'utilisation de l'appareil acheté.
9. Vous inaugurez une nouvelle clinique vétérinaire ? Dispomed vous permet **d'agencer la couleur de votre appareil dentaire** avec la décoration de la clinique !
10. Étant **manufacturier des appareils Highdent^{MC}**, Dispomed assure la disponibilité des pièces de ses produits ainsi que la connaissance technique de ses techniciens et vendeurs.

Les appareils de dentisterie Highdent

MODÈLE	INTRO	TRIO PLUS	QUATTRO PLUS
			
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR	31" à 41" 78,7 cm à 104 cm	31" à 41" 78,7 cm à 104 cm	De 31" à 41" 78,7 cm à 104,14 cm
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR	Mobile ou mural	Mobile ou mural	Mobile ou mural
CONSOLE DES PIÈCES À MAIN	Sélection manuelle des pièces à main Pièce à main encastrée	Ajustement de l'angle de la console Sélection automatique des pièces à main Pièce à main encastrée	Ajustement de l'angle de la console Sélection automatique des pièces à main Pièce à main encastrée
TABLETTE	9" par 14" 23 cm 35,5 cm Avec encavure pour les instruments et la pâte à prophylaxie	Pas de joint ou de vis visibles, pour un nettoyage plus facile Bord arrondi pour éviter la chute de vos instruments 12,5" X 17,5" (32 X 44,5 cm)	Pas de joint ou de vis visibles, pour un nettoyage plus facile Bord arrondi pour éviter la chute de vos instruments 12,5" X 17,5" (32 X 44,5 cm)
SUCCION	Non disponible	Non disponible	Succion activée au pied Ajustement de la tire Nettoyage facile du boyau Boyau plus flexible pour une utilisation facile
GARANTIE DE L'APPAREIL	5 ans	5 ans	5 ans
COMPRESSEUR	Compresseur à l'huile Le plus silencieux sur le marché Valves de vidange très facile d'accès	Compresseur à l'huile Le plus silencieux sur le marché Valves de vidange très facile d'accès	Compresseur à l'huile Le plus silencieux sur le marché Valves de vidange très facile d'accès
PAYS DE FABRICATION	Canada	Canada	Canada
	Visitez notre site	Visitez notre site	Visitez notre site



5 questions à se poser avant d'acheter une table vétérinaire

1. Quel est le **poids moyen** des animaux que vous traitez ?
2. Préférez-vous des ajustements **manuels ou automatiques** ?
3. Avez-vous besoin de **déplacer la table** d'une pièce à l'autre ?
4. Quel **type de chirurgie** pratiquez-vous le plus souvent ?
5. Quel est **l'espace** disponible pour la table ?

Tables de chirurgie et d'examen

Vet-Tables


MODÈLE	TABLE À CISEAUX VET-TABLES	TABLES ÉLECTRIQUES VET-TABLES	TABLE À CISEAU VET-TABLES AVEC BALANCE INTÉGRÉE	CIVIÈRE D'ANESTHÉSIE OU TABLE DE CHIRURGIE	TABLES D'EXAMEN À BASE TUBULAIRE
					
CAPACITÉ DE LEVAGE	300 lbs (136 Kg)	300 lbs (136 Kg)	300 lb (136 kg)	Ø	Ø
MÉTHODE DE LEVAGE	Automatique	Automatique	Automatique	Ø	Ø
INCLINAISON	Optionnel sur plateau de chirurgie, de dentisterie et en “V”	Oui	Ø	Ø	Ø
MÉTHODE D'INCLINAISON	Automatique	Manuel	Ø	Ø	Ø
HAUTEUR	Minimum 11" (27.9 cm) Maximum 43" (109 cm)	Minimum 31.25" (78.74 cm) Maximum 49" (124.46 cm)	Minimum 11" (27.9 cm) Maximum 43" (109 cm)	53" (134.62 cm)	35.5" (90.17 cm)
OPTION MOBILE	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
OPTIONS DE PLATEAU	• Examen • Chirurgie • Chirurgie chauffant • “V” • “V” chauffant • Dentisterie • Dentisterie chauffant	• Examen • Chirurgie • Chirurgie chauffant • “V” • “V” chauffant • Dentisterie • Dentisterie chauffant	Balance intégrée	Chirurgie	Examen
DIMENSIONS DU PLATEAU	4' (1.21m) ou 5' (1.52m)	4' (1.21m) ou 5' (1.52m)	4' (1.21m)	4' (1.21m)	4' (1.21m) ou 5' (1.52m) top
GARANTIE	5 ans	5 ans	1 an sur la balance 5 ans sur la table	5 ans	5 ans
PAYS DE FABRICATION	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada
	Plus d'information	Plus d'information	Plus d'information	Plus d'information	Plus d'information

Porte d'enclos Tobyguard


Les portes de chenil Tobyguard sont soudées à la main et polies avec la meilleure qualité d'acier inoxydable qui reflète la garantie de 5 ans de notre produit. Les **dimensions personnalisées** sont idéales pour les nouvelles cliniques et les rénovations de dimensions restreintes. Que ce soit pour un petit ou un grand projet, **les portes de chenil Tobyguard vous offriront une qualité qui durera toute la vie !** Fièremment fabriqué au Canada par Dispomed.

Personnalisez votre porte de chenil >

Utilisez notre nouveau configurateur de porte pour chenil.

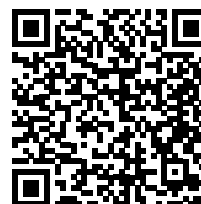

Scannez et
configurez

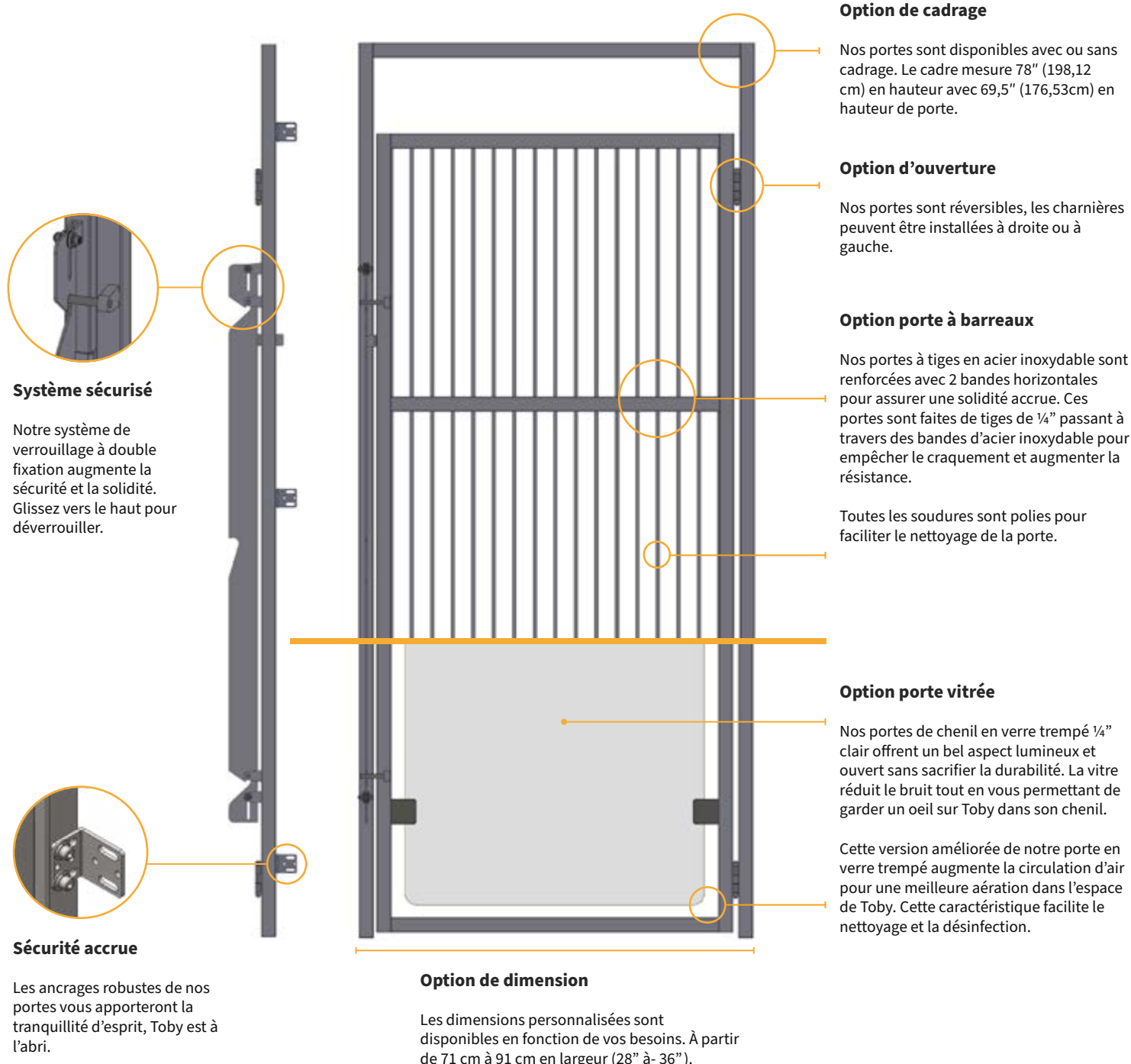


Les options des portes de chenil Tobyguard


1. Option de façade de la porte

Choisissez entre une porte à barreaux ou en verre trempé.

Porte à barreaux

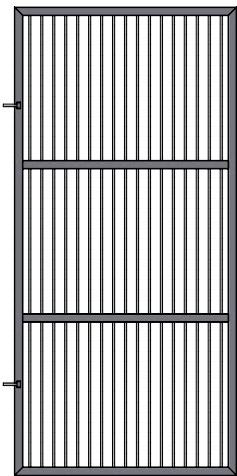


Porte en verre

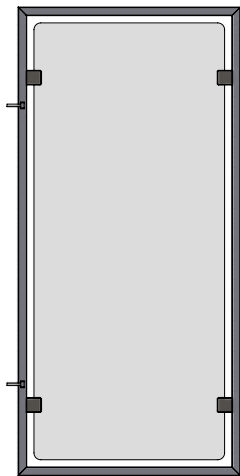


2. Option de cadrage

Choisissez entre avec cadrage ou sans cadrage.


Cadrage

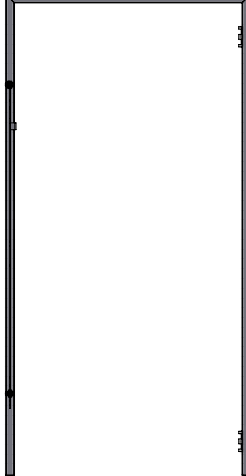

Sans cadrage

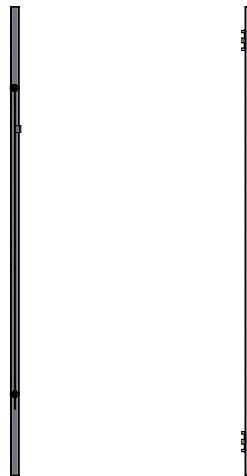

3. Option dimensions personnalisée

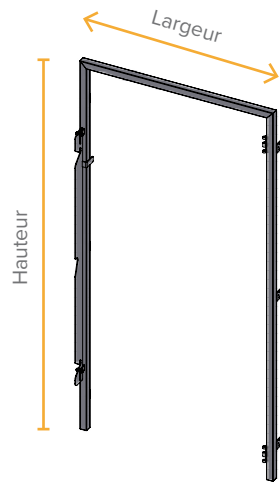

Hauteur avec cadrage: 78" (198,12cm)
Hauteur de la porte: 69.5" (176,53cm)

4. Option d'ouverture de porte



Pentures sur la droite



Pentures sur la gauche



7 questions à se poser pour trouver le bon moniteur pour votre pratique

1. Le moniteur est-il fabriqué par un fabricant renommé et fiable ?
2. Quelle est la garantie ?
3. Le fabricant utilise-t-il une technologie bien connue ?
4. Est-il facile à utiliser ?
5. Existe-t-il des références sur lesquelles je pourrais appuyer ma décision ?
6. Puis-je avoir une démonstration du moniteur ?
7. Quels sont les paramètres les plus importants pour mon usage ?

Les moniteurs

DigiCare, une valeur sûre !

MODÈLE	LIFEWINDOW ONE	LIFEWINDOW LITE	LIFEWINDOW LW9X
			
ÉLECTROCARDIOGRAPHIE	3/5 câble ECG mesurant jusqu'à 350 bpm	3 câble ECG mesurant jusqu'à 999 bpm 3/5 câble ECG mesurant jusqu'à 350 bpm	3 câble ECG mesurant jusqu'à 999 bpm 3/5 câble ECG mesurant jusqu'à 350 bpm
OXYMÉTRIE DE POULS	Masimo® SET Rainbow Nellcor® Nonin®	Masimo® SET Rainbow Nellcor® Nonin®	Masimo® SET Rainbow Nellcor® Nonin®
CAPNOGRAPHIE	Mainstream (externe) Sidestream (interne ou externe)	Mainstream (externe) Sidestream (interne ou externe)	Mainstream (externe) Sidestream (interne ou externe)
PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE	Suntech® VetBP™	Suntech® VetBP™	Suntech® VetBP™
TEMPÉRATURE	Un canal	Un ou deux canaux	Un ou deux canaux
PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE	Ø	Jusqu'à deux canaux	Jusqu'à deux canaux
FRACTION DE L'OXYGÈNE INSPIRÉ	Ø	Disponible	Disponible
AGENTS ANESTHÉSQUES	Disponible	Ø	Disponible
DÉBIT CARDIAQUE	Ø	Ø	Disponible
DISPONIBILITÉ DU WI-FI	Disponible	Disponible	Disponible
VISUALISATION À DISTANCE	Disponible	Disponible	Disponible
ÉCRAN	Écran tactile de 4.3"	Écran tactile de 8.4"	Écran tactile de 12.1"
DIMENSIONS	9.1" x 3.5" x 5.6"	9.3" x 6.9" x 6.5"	13.6" x 9" x 7"
POIDS	3-5 lb	10 lb	18 lb
AUTONOMIE DES PILES	Jusqu'à 7 heures	Jusqu'à 1 heure	Jusqu'à 2 heures
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans
	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info



6 questions à se poser pour acheter le bon microscope

1. Désirez-vous travailler avec des objectifs de qualité ?
2. Est-ce que le personnel de la clinique porte des lunettes?
3. Est-ce que l'ergonomie de la tête de microscope est importante pour vous ?
4. Désirez-vous une lumière qui ne chauffe pas ?
5. La garantie est soutenue par le distributeur ou le fabricant ?
6. Quelle est la durée de la garantie ?

Les microscopes

Labomed

MODÈLE	LABOMED CxL	LABOMED Lx400	LABOMED Lx500
			
QUALITÉ DES OBJECTIFS	Semi-plan achromatique	Plan achromatique	Phase
AJUSTEMENT DES OCULAIRES*	Ajustement de la dioptrie	Ajustement de la dioptrie	Ajustement de la dioptrie
ERGONOMIE DE LA TÊTE DU MICROSCOPE	Tête inclinée à 45 degrés. Distance interpupilaire de 54 à 74 mm. Ajustement oculaire de 10 par 18 mm.	Tête Siedentopf, inclinée à 30 degrés. Ajustement oculaire de 10 par 20 mm. Distance interpupilaire de 48 à 75 mm.	Tête siedentopf 30 degrés. Inclinaison de 0 à 25 degrés. Distance interpupilaire de 47 à 75 mm. Ajustement oculaire de 10 par 20 mm.
POSSIBILITÉ D'ILLUMINATION**	Halogène DEL	Halogène 20W Halogène 30W DEL	Halogène 30W
POSSIBILITÉ D'ANGLES D'OBJECTIFS	Régulier	Angle renversé	Angle renversé
PROVENANCE	États-Unis	États-Unis	États-Unis
GARANTIE	5 ans Soutenue par le fabricant	5 ans Soutenue par le fabricant	5 ans Soutenue par le fabricant
COÛT D'ENTRETIEN	\$	\$	\$
	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info

* Un ajustement de la dioptrie est avantageux pour les personnes ayant des problèmes de vision. Cet ajustement permet de personnaliser la puissance des oculaires, et ce de façon individuelle, ainsi vous obtenez une vision claire et précise de votre lame.

** Contrairement à l’halogène la DEL est une lumière froide qui prévient l’huile à immersion de se réchauffer et de migrer vers les objectifs ce qui aurait pour effet de les endommager. Si vous devez analyser des spécimens vivants, le DEL sera recommandé comparativement à l’halogène, qui pourrait avoir un effet néfaste, dû à la chaleur qu’il dégage, à votre spécimen.

La lumière DEL comporte également un autre avantage qui est la durée de vie des ampoules. En effet les ampoules DEL dur en moyenne 100 000 heures comparativement à 2 000 heures pour les ampoules d’halogène.



5 questions à se poser avant de faire l'achat de votre autoclave

1. Avez-vous un employé attitré à la stérilisation ?
2. Quelle est la grosseur maximum des instruments à stériliser ?
3. Quel est l'espace disponible en clinique pour l'autoclave ?
4. Est-ce que le temps de stérilisation est important pour la clinique ?
5. Combien de temps par semaine consacrez-vous à la stérilisation ?

Les autoclaves automatiques Tuttnauer

MODÈLE	EZ9	EZ9Plus	Tvet 10E	EZ10K	Tvet 11E	EZ11Plus	3870EA
							
GROSSEUR DE LA CHAMBRE	9"x18"	9"x19.8"	10" x 19"	10"x19"	11" x 19.8"	11" x 19.8"	15"x30"
NB DE PLATEAUX	3	3	4	4	5	5	2
DIMENSION DES PLATEAUX	16.3" x 6.7" x 0.8"	16.3" x 6.7" x 0.6"	16.3" x 6.7" x 0.8"	16.3" x 6.7" x 0.8"	16.3" x 6.7" x 0.6"	16.3" x 6.7" x 0.6"	26.6" x 11.3" x 1"
DIMENSION DU BOITIER	21.5" x 20" x 14.4"	24.8" x 19.1" x 15.1"	21.5" x 20.1" x 14.4"	21.5" x 20" x 14.4"	24.8" x 20.9" x 17.3"	24.8" x 20.9" x 17.3"	34.5" x 26" x 20.6"
TEMPS DU CYCLE DE STÉRILISATION*	30 min	24 min	21 min	20 min	26 min	28 min	40 min
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
PRIX D'ENTRETIEN	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$
	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info

Les autoclaves manuels Tuttnauer

MODÈLE	1730	2340M	Tvet 9M	2540M	Tvet 10M	3870M
						
GROSSEUR DE LA CHAMBRE	7"x13"	9"x18"	9" x 18"	10"x19"	10" x 19"	15" x 30"
NB DE PLATEAUX	3	3	3	4	4	2
DIMENSION DES PLATEAUX	11.6" x 4.7" x 0.8"	16.3" x 6.7" x 0.8"	16.3" x 6.7" x 0.8"	16.3" x 6.7" x 0.8"	16.3" x 6.7" x 0.8"	26.6" x 11.3" x 1"
DIMENSION DU BOITIER	17.9" x 17.4" x 12"	21.5" x 20.1" x 14.4"	21.5" x 20" x 14.4"	21.5" x 20" x 14.4"	21.5" x 20" x 14.4"	34.5" x 26" x 20.6"
TEMPS DU CYCLE DE STÉRILISATION*	16 min	30 min	20 min	30 min	26 min	40 min
GARANTIE	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
PRIX D'ENTRETIEN	\$	\$	\$	\$	\$	\$\$
	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info	Plus d'info



Le top 6 des questions les plus importantes à se poser avant de faire l'achat d'un système d'évacuation.

1. Combien d'appareils d'anesthésie avez-vous en clinique ?
2. Préférez-vous un produit de longue durée ou jetable ?
3. Combien d'heures de chirurgie faites-vous par semaine ?
4. Y a-t-il quelqu'un en clinique qui a le temps de faire la vérification quotidienne du système ?
5. Quelle est la durée de la garantie ?
6. Quel service vous est offert en cas de bris ?

Les systèmes d'évacuation des gaz

MODÈLE	FILTRE AU CHARBON	SYSTÈME D'ÉVACUATION PASSIF	VENTILATEUR D'ÉVACUATION DES GAZ	SUCCION ACTIVE OU POMPE À VIDE
				
TYPE DE SYSTÈME	Passif	Passif	Semi actif	Actif
TYPE DE CONFIGURATION	Charbon actif	Tuyau corrugué	Interface d'évacuation	
QUANTITÉ D'APPAREILS DESSERVIS	1	1	1 à 8	Varie selon la grosseur de la pompe
VÉRIFICATION	Quotidienne	Quotidienne	Annuelle	Annuelle
DURÉE DE VIE	Poids de 50g	10 à 15 ans	10 à 15 ans	10 à 15 ans
MOYEN DE VÉRIFICATION	En pesant le filtre	Technicien qualifié	Technicien qualifié	Technicien qualifié
GARANTIE	Aucune	Aucune	5 ans	1 an
PROVENANCE	États-Unis	Canada	Canada	
PRIX	18.75\$ à 23.00\$	200\$ à 300\$	1500\$ à 4000\$	5000\$ et plus
	Plus d'info		Plus d'info	

Les accessoires d'anesthésie vétérinaire

Vous désirez vous équiper d'un nouvel appareil d'anesthésie ou vous désirez vous offrir un complément pour vos interventions? Prenez conscience des nombreux avantages qu'offrent les divers accessoires d'anesthésie vétérinaire. Facilitant le travail des vétérinaires et des technicien(ne)s, ces produits complèteront votre travail afin de vous concentrer uniquement sur l'intervention avec le patient.



Interface d'évacuation

Lors d'une chirurgie, tous les gaz non consommés par l'animal doivent être envoyés à l'extérieur pour éviter que ceux-ci soient respirés par le personnel de la clinique.

Branchée avec un ventilateur d'évacuation, l'interface d'évacuation **contrôle le débit de succion automatiquement** afin de le maintenir balancé avec la quantité de gaz non utilisée. Si vous n'êtes pas muni de ce type d'installation, vous devez, entre chaque patient, ajuster la force de succion du ventilateur d'évacuation afin qu'il n'aspire pas l'air dont le patient a besoin ou vous devez compenser par une augmentation du débit de gaz. Vous perdez ainsi du temps sans oublier que le risque d'erreur ou d'oubli est plus élevé sans interface d'évacuation.

[Plus d'info](#)



Alarme de circuit

Tant de choses sont à vérifier lors d'une chirurgie. **Évitez une source de stress** en installant sur votre appareil d'anesthésie une alarme de circuit.

Lors d'une ventilation assistée, l'alarme vous avise quand vous approchez d'un niveau de pression à risque. De plus, si vous oubliez la soupape d'évacuation des gaz fermée, l'alarme de circuit vous avertit à l'aide d'un système sonore. **L'alarme est réglable** à la pression qui vous convient et avec laquelle vous serez confortable de travailler.

[Plus d'info](#)



Adaptateur de circuit Bain Moduflex

Un circuit ouvert de type « Bain » sur l'appareil d'anesthésie vous fait bénéficier d'un **meilleur contrôle** lors des interventions vétérinaires. Le ballon étant toujours gonflé, nul besoin d'attendre que celui-ci ait atteint une certaine grosseur avant de ventiler le patient.

Comparativement aux autres circuits ouverts tels, le Jackson Rees et le Ayres T Piece, le Bain Moduflex est équipé d'un manomètre à pression vous donnant la possibilité de **vérifier la pression des poumons** de l'animal. L'adaptateur Bain est équipé d'une soupape momentanée pour éviter d'oublier la soupape fermée, ce qui pourrait causer un traumatisme pulmonaire.

[Plus d'info](#)



Supports pour petit cylindre

Lors d'une chirurgie, tous les gaz non consommés par l'animal doivent être envoyés à l'extérieur pour éviter que ceux-ci soient respirés par le personnel de la clinique. Branchée avec un ventilateur d'évacuation, l'interface d'évacuation **contrôle le débit de succion automatiquement** afin de le maintenir balancé avec la quantité de gaz non utilisée. Si vous n'êtes pas muni de ce type d'installation, vous devez, entre chaque patient, ajuster la force de succion du ventilateur d'évacuation afin qu'il n'aspire pas l'air dont le patient a besoin ou vous devez compenser par une augmentation du débit de gaz. Vous perdez ainsi du temps sans oublier que le risque d'erreur ou d'oubli est plus élevé sans interface d'évacuation.

[Plus d'info](#)

Les accessoires d'anesthésie vétérinaire – suite



Filtre antibactérien

Que vous sachiez ou non qu'un patient est contagieux, le filtre antibactérien **protège votre appareil d'anesthésie et les futurs patients** d'une contamination. Cet accessoire est également très apprécié lors des procédures plus spécialisées telles que les lavages broncho-alvéolaires afin **d'éliminer les risques de propagation de virus** dans l'appareil d'anesthésie.

[Plus d'info](#)



Chambre à induction

Vous devez faire une intervention sur un chaton et ce dernier est en état de panique? La chambre à induction est un outil très pratique qui vous **permet d'endormir les patients de plus petites tailles rapidement**.

[Plus d'info](#)

Nous fabriquons les meilleurs produits pour vos besoins!

Chez Dispomed, nous concevons et fabriquons de l'équipement vétérinaire de qualité comme les appareils d'anesthésie Moduflex^{MC}, les appareils dentaires Highdent^{MC}, les tables Vet-Tables et les portes d'enclos Tobyguard. Avec sa réputation de produit haut de gamme, Dispomed est fier d'offrir une garantie de 5 ans sur les Moduflex^{MC}, Highdent^{MC}, Vet-Tables et Tobyguard. Dispomed connaît une croissance importante avec ses équipements qui sont distribués dans plus de 35 pays.

Soutien technique

Nos techniciens internes ont l'expertise nécessaire pour répondre à toutes vos questions sur nos produits. En cas de problème, un service de soutien technique est offert par téléphone au 1 800 363-1746 ou par courriel au info@dispomed.com

Techniciens certifiés

Nos techniciens sont disponibles sur rendez-vous, pour des visites de service, d'entretien ou en cas d'urgence.

Contact

Dispomed ltée.

745 Nazaire-Laurin

Joliette (Qc) Canada J6E 0L6

T: 1-800-363-1746 (Canada, États-Unis seulement)

T: 1-450-759-9395

F: 1-450-759-8181

info@dispomed.com

Site internet, blogue et média sociaux

www.dispomed.com/fr

facebook.com/dispomed

youtube.com/Dispomedvet